

保証書

品名：エアーレッグケア		品番：PA-002
お買い上げ日 年 月 日	販売店名・住所・電話番号・ご注文番号（ネット購入者）	
保証期間（お買い上げ日から） 1年間		
お客様	お名前	
	電話番号：	
	ご住所：(〒　　ー　　)	

※ご購入を証明するレシートまたは送り状、注文番号などがわかるものを必ず添付してください。

【保証規定】

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に万一故障した場合には無償修理いたします。修理をご依頼になる場合は、カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。

保証期間内でも次の場合は有償修理になります。

1. 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障または損傷
2. お買い上げ後の落下、移動など輸送上の破損および設置時の破損または損傷
3. 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷など天災地変による故障または損傷
4. 指定以外の電源電圧を加えたことによる故障または損傷
5. 一般的家庭以外（業務用または業務用に近い長時間の使用）で使用した場合の故障または損傷
6. 保証書の提示がない場合
7. 保証書にお客様、お買い上げ日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合
8. ご使用後のキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による故障または損傷
9. 不具合の原因が本製品以外（外部要因）による場合

本保証書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan）

保証書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

お客様の個人情報は、本製品にかかる業務においてのみ利用します。第三者が不当に触れることのないよう、弊社規定に基づき責任を持って管理いたします。

- 修理、使いかた、お手入れなどに関するご相談・ご依頼は、下記へご連絡ください。

お客様サポートセンター



0570-003-688

受付時間：月曜日～金曜日（土日祝日および弊社休日を除く）10:00～17:30

〒141-0031 東京都品川区西五反田 2-13-6 セラヴィ3F

メールでのお問い合わせ：info@souyi-japan.com

ホームページ：<http://www.souyi-japan.com>

公式オンラインショップ：<https://www.souyi-japan.shop> ソウイジャパン株式会社


SOUYI®

取扱説明書（保証書付）

ご使用の前に、この取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに保管してください。

エアーレッグケア

品番：PA-002

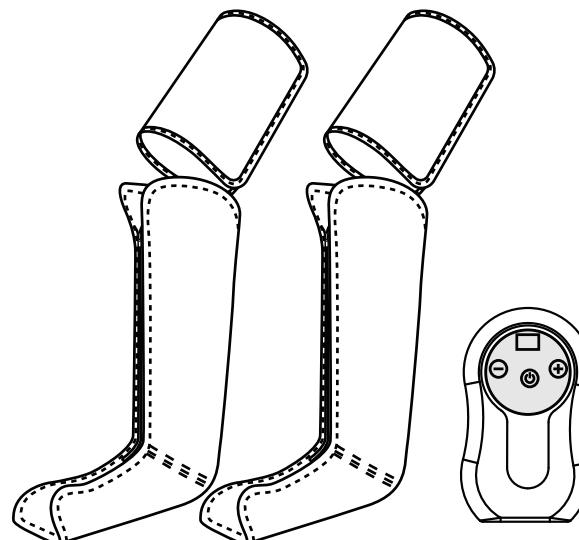

この度は本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

本製品をご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読み頂き、内容を十分に理解された上で事故が起こらぬように記載内容に従って正しくご使用願います。また、一度お読みになつた後も必要時いつでもご確認できるように、すぐに取り出せる場所で大切に保管してください。治療を受けている場合はこの製品をご使用する前に医師にご相談ください。

ソウイジャパン株式会社

安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前にこの「安全上のご注意」と本説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとはいつでも見られる場所に必ず保管してください。安全上のご注意は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を防ぐために、いろいろな絵表示をしてています。

	警告 誤った使い方をしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意 誤った使い方をしたときに、人が傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。
	誤った使い方をしたときに、人が傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。
	この記号は、禁止される行為を表しています。

⚠ 警告（症状について）

	※ 次の人は使用しないでください (事故やけがの原因になります) ①血栓(寒栓)症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎および皮膚感染症＜皮下組織の炎症を含む＞など ②骨粗鬆症の人、脊椎を骨折している人、捻挫、肉離れなどの急性疼痛疾患の人、 ③ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ④妊娠中や出産直後の人 ⑤脚部に重度の血行障害のある人 ⑥自分で意思表示ができない人または操作できない人に使わせないでください。
--	--

	※ 医師の治療を受けているときや下記の人 は必ず医師と相談のうえ使用してください ①悪性腫瘍のある人 ②心臓に障害のある人 ③糖尿病など高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ④施療部位に創傷のある人 ⑤体温38°C以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状くけん怠感、悪寒、血圧変動など)>の強い時期、衰弱しているとき ⑥安静を必要とする人や著しく体調のすぐれないとき ⑦上記以外に身体に特に異常を感じているとき ※ 使用中に身体に異常があらわれたり感じたときや使用しても効果があらわれない場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。
--	--

⚠ 警告（お使いのときは）

- ①足裏用パッドは指定部位以外に使わない。また骨に当てないでください。
②使用中に立ったり歩いたりしないでください。
③お子様には使わせないでください。また商品の上で遊ばせたりのせたりしないでください。
④商品を布団やコタツの中に入れて使わないでください。
※事故やけがの原因になります。
⑤商品にピンや針を突き刺さない、または刃物で傷つけないでください。
(火災や感電やけどの原因になります。)
⑥改造したり分解しないでください。(発火したり異常動作したりして、けがをする原因になります。)

※ お年寄り、皮膚の弱い方、皮膚感覚が弱い方は使用直後に肌に赤みが出る場合があります。1時間程経過しても赤みが消えない場合は医師にご相談ください。

- ①使う前には必ず商品が破れていないか確認してください。
※どんな小さな破れでも直ちに使用を中止し、アダプターを抜き修理を依頼してください。(けがや感電の原因になります)
②初めて使用者の人や、使い慣れるまではエアー圧力を弱めてご使用ください。(けがや体調不良の原因になります)

	修理、改造、分解しないでください。 火災、感電の原因になります。 内部の点検・修理は販売店にご依頼ください。 分解禁止		電源コードや電源プラグが傷んでいたり熱くなったり、コンセントの差し込みがゆるい場合は使用しないでください。 感電やショート、火災の原因になります。 禁止
	電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。また抜くときはコードを引っ張らずプラグを持って抜いてください。 禁止		たこ足配線や延長コードなどの定格を超える使い方をしないでください。 火災の原因になります。 禁止
	交流100V以外では使用しないでください。 火災・感電の原因になります。 禁止		可燃性スプレーを本体にかけたり、引火性のもの、可燃性のもののそばで使用しないでください。 火災の原因になります。 禁止
	お手入れや点検・移動の際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ご使用後は必ず電源スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いてください。 プラグを抜け		本体を水につけたり、水をかけないでください。水回り、風呂場など湿気のある場所では使用しないでください。 火災・感電の原因になります。 禁止
	濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。 感電・やけど・けがの原因になります。 濡れ手禁止		異常、故障時にはすぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。 火災、感電の恐れがあります。

安全上のご注意

⚠ 注意



<症状について>

・本品のご使用により発疹、発赤、かゆみなどの症状があらわれ場合は、ご使用を中止し医師に相談してください。(事故や体調不良の原因になります)



<商品について>

- ①浴槽など湿気の多い場所では使わないでください。(感電の原因になります)
- ②商品に水をこぼさないようにしてください。
- ③ご使用中に眠らないでください。
- ④飲酒後の使用はおやめください。(事故やけがの原因になります)
- ⑤ご使用中にアダプターをコンセントから抜かないでください。
- ⑥エアーパイプを抜くときはパイプを引っ張らないで、接続部を持って優しく抜いてください。(破損や故障の原因になります)
- ⑦収納時に電源コードを商品に巻きつけないでください。
- ⑧エアーパイプを折ったり商品に巻きつけないでください。(断線、ショートによる火災・感電の原因になります)
- ⑨アダプターは指定されたものを使ってください。
- ⑩停電時はただちにアダプターを抜いてください。



※妊娠中や出産直後の方は使用しないでください。

※脚部に重度の血行障害のある方は使用しないでください。

※1日の使用回数は1回です。(約15分で自動的に電源が切れます)

1回の使用が15分未満の場合、複数回の合計使用時間を1日15分以内にしてください。(長時間の使用は筋肉や神経に必要以上の刺激となり、逆効果になることがあります。)





●足に使用した跡がつくことがあるのでご注意ください。

- ・お出かけ前の使用にはご注意ください。
- ・気になる場合は靴下やズボンの上から装着してください。

●装着時、面ファスナーに洋服・ストッキングがつかないように注意してください。

- ・洋服やストッキングに傷がつく恐れがあるのでご注意ください。

各部の名前

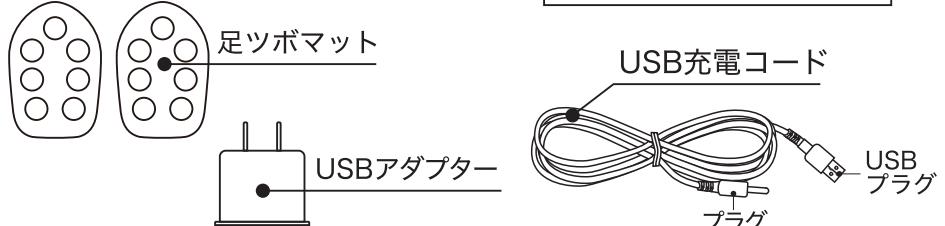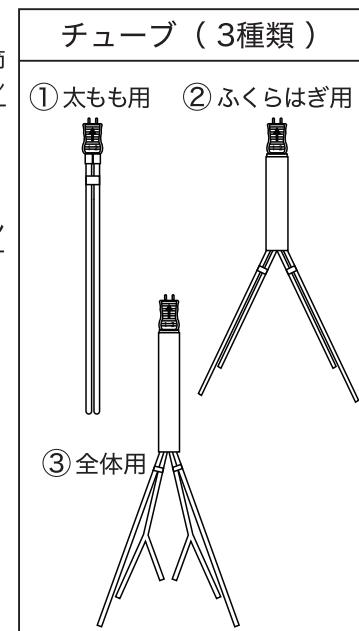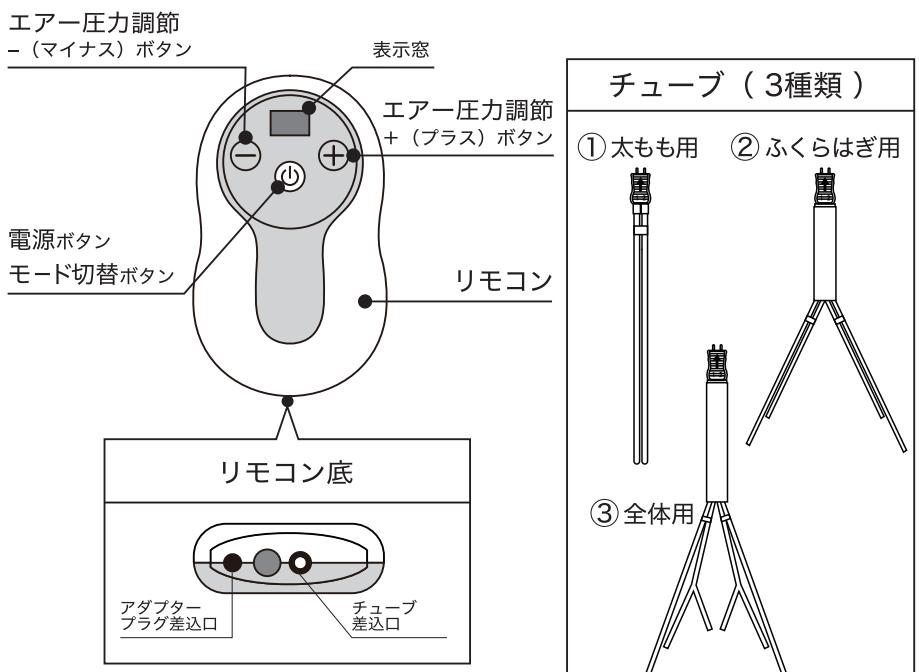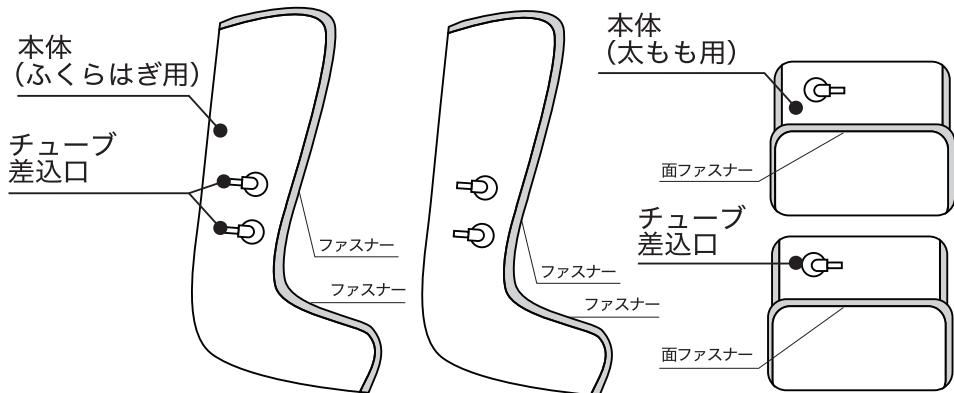


使用方法

使用前にご確認ください

- ・本体に破損などがないかご確認ください。
- ・チューブに破損がないかご確認ください。

注意

- ※肌に使用跡がつく場合があります。使用跡が気になる場合は、靴下やズボンの上から装着してください。
- ※ふくらはぎや足に使用跡がつき、直ぐにとれない場合がありますのでお出かけ前の使用はご注意ください。
- ※装着時に洋服やストッキングにファスナーや面ファスナーがつかないようご注意ください。洋服やストッキングが破損・傷・汚れてしまう恐れがあります。
- ※初回使用時はエアーカーボンを弱めてお試し頂き、その後お好みの圧力でご使用ください。

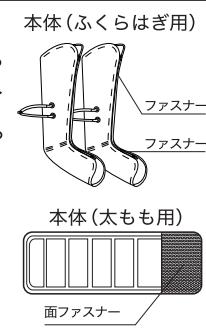


1. USB充電コード、USBアダプターを接続します。

USBアダプターを使用する場合

USB充電コードのUSBプラグ側をUSBアダプターに繋げて、もう片方のプラグをリモコン底のUSB充電コードプラグ差込口に繋げ、USBアダプターをコンセントに接続します。

PC等を使用する場合

USB充電コードのUSBプラグ側をお持ちのPC等に繋げて、もう片方のプラグをリモコン底のUSB充電コードプラグ差込口に繋げます。

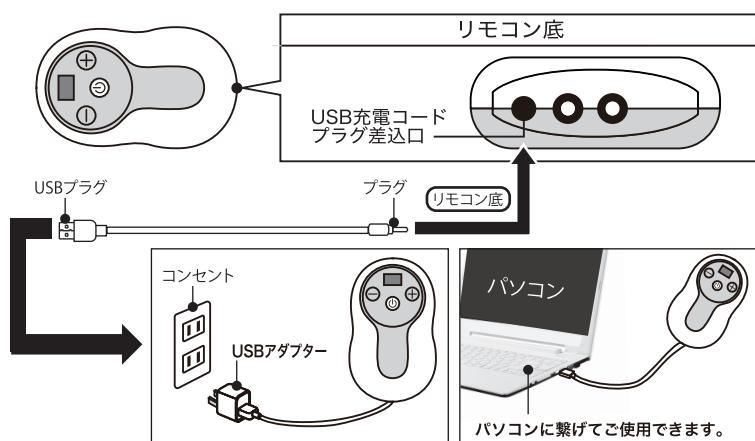

※本商品は充電式ではありません。必ずコードを繋いでお使いください。
※USBコードをリモコンと電源元に差した時、リモコンが一瞬振動します。


使用方法

2. チューブを繋げます。

- ・使用するチューブのチューブプラグをリモコンのチューブ差込口に差込み、次に本体にチューブを繋げます。

※チューブは1本でも本体に接続されていないと、接続されていない差込口からエアーが抜けて正常に使うことができません。

チューブ（3種類）/ 差込図

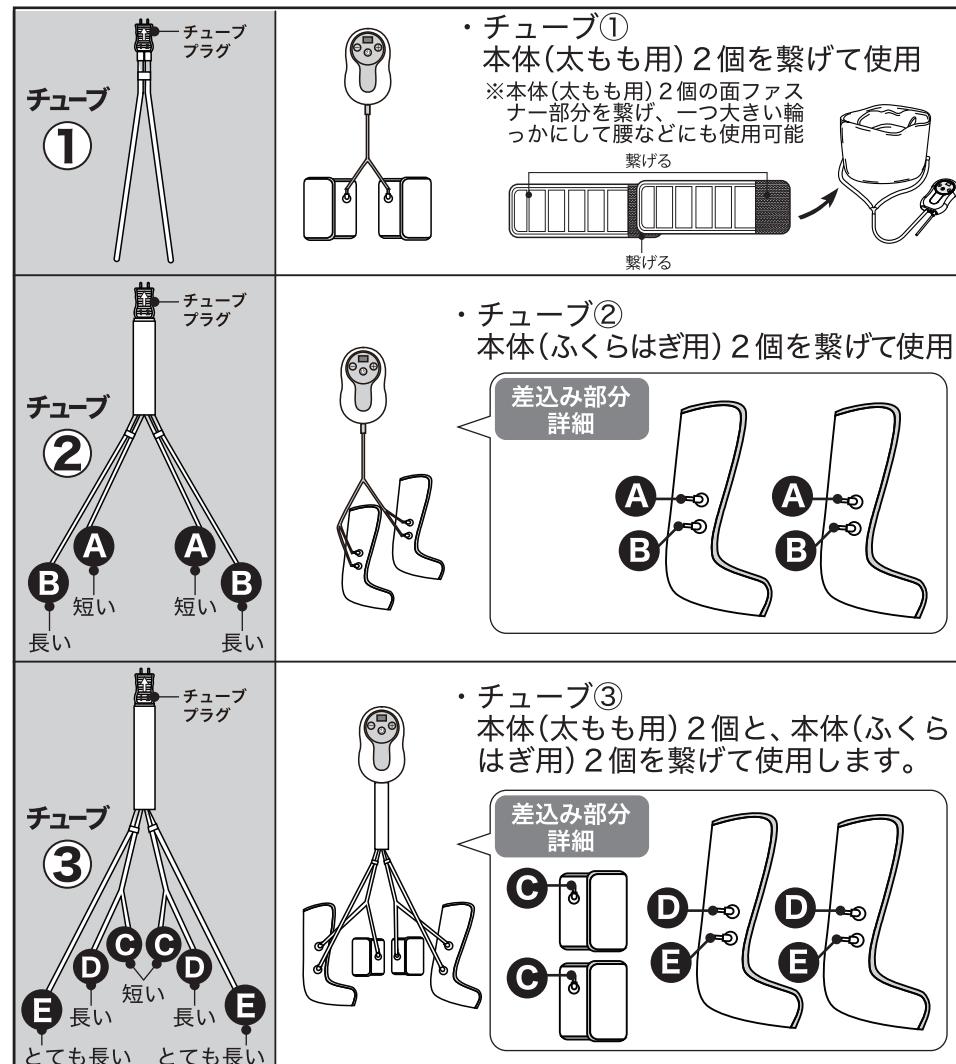

使用方法


3. 本体を装着します。

- 太もも用の本体は、太ももが固定されるように面ファスナーで調節しながら固定して装着します。
※太ももに強く巻きつけないでください。使用時にエアーが入るので固定されている程度に装着してください。電源を入れてからエアーの量で微調整ができます。
- ふくらはぎ用の本体は、先ずファスナーを全て開け足を中心に入れてファスナーを閉めて装着します。
※かかと部分が合うように足を入れて装着してください。

4. 電源を入れます。


- ・電源ボタンを長押しすると電源が入りケアが開始されます。

※電源を入れてから「15回」動作を繰り返します。
※動作の繰り返し回数は表示窓に表示されます。
(使用時間や、残りの稼働時間ではありません。)
※ケア途中でも電源ボタンを長押しすれば電源が切れます。
※エアーが本体全体に入るには時間がかかります。
※各部に入るエアーの量・入る時間には差が生じるため、各部の圧のかかり方にも差が生じます。

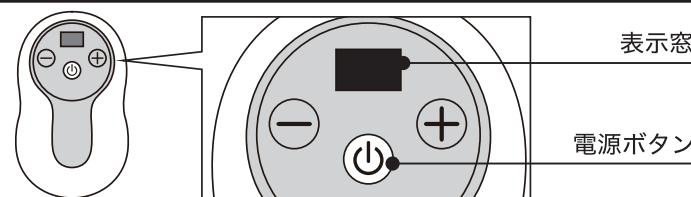

5. モードを切替えます。

- ・モードは2種類（リズム・全体）あり、電源ボタンを押す度にモードがリズム「10」、全体「20」に切り替わります。
※初回使用時は、モード「10」でリズムになります。

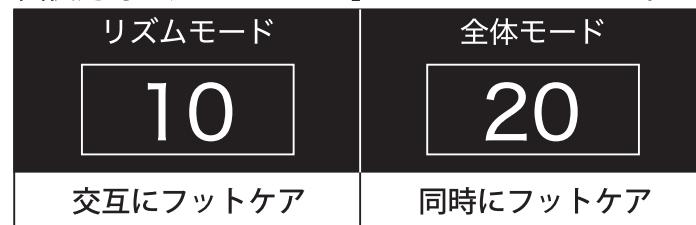

※モード切り替え時に表示される「10」「20」はモードナンバーです。
使用時間や、残りの稼働時間ではありません。


使用方法

本体	リズムモード	全体モード
太もも用	左右交互にエアーが入る	左右同時にエアーが入る
ふくらはぎ用	「足先」と「ふくらはぎ」に交互にエアーが入る	全て同時にエアーが入る
太もも用 + ふくらはぎ用	「足先」と「ふくらはぎ+太もも」に交互にエアーが入る	全て同時にエアーが入る

6. エアー圧力を調節します。


- ・強さ（エアー圧力）は9段階あり、ご使用開始は強さ（エアー圧力）「5」で設定されていますので、お好みに合わせて+（プラス）と-（マイナス）ボタンを押してエアー圧力を調節してください。

※強さ（エアー圧力）はボタンを押した際に表示窓でご確認できます。

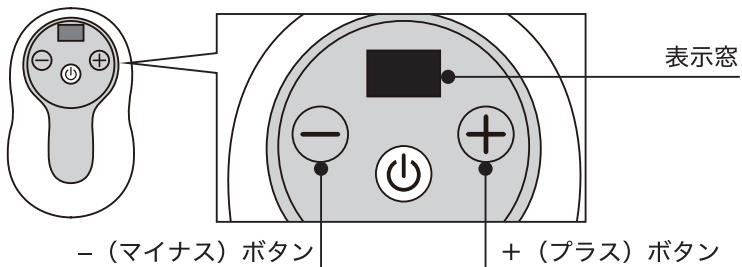

足ツボマットを使用する

- 付属の足ツボマットを使い足裏を刺激しながらケアができます。
※足ツボマットを使用するときは必ず電源を切った状態で、足・ふくらはぎエアーパッドのファスナーを開け、足裏パッドの突起部を足裏に合わせるようにセットし、ファスナーを閉めてください。

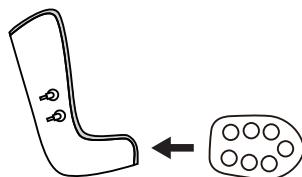

使い終わったら

- 必ず電源を切ってから本体を外してください。
- 電源を切った後、本体のエアーを直ぐに抜きたい場合はチューブを本体から抜いてください。エアーが抜けます。

△ 注意

※チューブを抜く際は必ず根元を持ち、ゆっくり抜いてください。
※収納時にUSBアダプターや、チューブをリモコンや本体に巻き付けないでください。

保管

※小さな子供の手の届く所に置かないでください。
※温度・湿度の高い所や直射日光のある所に置かないでください。

お手入れ

※必ず電源を切りアダプターを抜き、お手入れください。
※水で直接商品を洗わないでください。
※洗濯機で洗わないでください。
※研磨剤やシンナー、ベンジンは使用しないでください。

【本体】

- 柔らかい布に水を含ませ固くしぼり拭いてください。汚れがひどいときは水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ固くしぼり拭いてください。
- 面ファスナーにゴミや髪の毛などがからまった場合は、つまようじなどで取り除いてください。

【USB充電コード・USBアダプター】

- USBアダプター
 - 乾いた布で拭いてほこりを取ってください。

○コンセント接続部

- コンセントを含め、電源プラグとの間にほこりが溜まっている時は電源プラグをはずしてほこりを取り除いてください。放置するとトラッキング現象の発生原因になります。

※トラッキング現象とは・・・

コンセントへ長期間差し込み続けることにより、コンセント接続部にほこりなどが堆積し、空気中の湿気を吸収し微小な漏電スパークによる発熱で電源プラグが炭化し、最悪の場合は発火に至る現象。

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の項目を確認してください。※ご自分での分解・改造はおやめください。

症状	考えられる原因・対応方法
空気（エアー）が入らない	<ul style="list-style-type: none">チューブが破損、抜けていないかご確認ください。チューブの差込口が全て接続されていることをご確認ください。チューブが奥まで差し込まれているかご確認ください。
空気（エアー）が抜けない	<ul style="list-style-type: none">電源を切り、本体からチューブを抜いてください。
空気（エアー）の量が多く痛い	<ul style="list-style-type: none">-(マイナス)ボタンで調節してください。本体をゆるく巻き直してください。

●それでも解決できないときは、お買い上げの販売店または弊社にお問い合わせください。

製品仕様

品番	PA-002
電源	AC100 V 50/60 Hz
アダプター	DC 12 V 1A
定格消費電力	10 W
質量(重量)	約 1.5 kg (付属品全て含む)
エアーパワ	9段階
モード	2モード(リズム/全体)
USB充電コード長さ	約 1.5 m (全長)
付属品	本体(ふくらはぎ用)、本体(太もも用)、足ツボマット、リモコンチューブ(全体用)、チューブ(ふくらはぎ用)、チューブ(太もも用)、USB充電コード、USBアダプター、取扱説明書兼保証書
生産国	中国

※製品の外観および仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

- 保証書(本書裏表紙)に必ず「販売店名」「お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、お買い上げのレシートとともに大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。
- 製品に異常のある場合は、お客様ご自身で修理したり、分解することは危険です。手を加えずに、弊社までご連絡ください。
- ご不明な点や修理に関するご質問は、お買い上げの販売店または弊社までお問い合わせください。